


Analizador **Coag Dx**™ de IDEXX

Guía de referencia rápida

Componentes del Analizador Coag DX™



Vista superior del Analizador Coag Dx de IDEXX

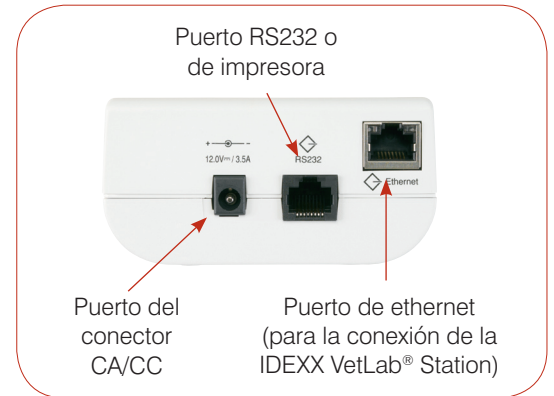

Vista lateral del Analizador Coag Dx de IDEXX

Importante:

Utilice exclusivamente Casetes Coag Dx™ de IDEXX en el Analizador Coag Dx de IDEXX.

Botón de número/opción/acción

Botón	Descripción
Start	<ul style="list-style-type: none"> Pulse este botón y manténgalo pulsado para activar o desactivar el analizador. Púlselo para iniciar una prueba.
Note	Pulse este botón para cambiar entre caracteres alfabéticos (ABC) y numéricos (123) cuando se encuentre en el modo de entrada de datos.
ID	Pulse este botón para visualizar el menú Identify Patient (Identificación del paciente) en el que puede: <ul style="list-style-type: none"> Introducir un ID de cliente (CID). Introducir un ID de paciente (PID). Seleccionar una especie. Recuperar el último cliente o paciente.
QC	Pulse este botón para visualizar el menú QC Status (Estado QC) en el que puede iniciar una prueba EQC (Control de calidad electrónica). La cámara de pruebas debe estar vacía para que se pueda ejecutar una prueba EQC.
Print	Pulse este botón para visualizar el menú Print (Impresión) en el que puede imprimir los resultados o la información del sistema en una impresora externa.

Botón	Descripción
Data Base	Pulse este botón para visualizar el menú Data Base (Base de datos) en el que puede: <ul style="list-style-type: none"> Visualizar el número del paciente o los resultados de la prueba EQC almacenados y disponibles actualmente. Visualizar los resultados almacenados de la prueba EQC o del paciente. Eliminar los informes del paciente o de las pruebas EQC.
0 – 9	<ul style="list-style-type: none"> Permite seleccionar una opción de menú. Permite introducir números o letras. Permite visualizar pulsando 0 el Menú principal. Pulse 7 para visualizar los resultados anteriores o 9 para visualizar los resultados siguientes.
Cancel	<ul style="list-style-type: none"> Permite detener una operación. Permite volver a la pantalla de inicio (pantalla "Insert...Cartridge" (Introducir... Casete). Permite desparar el cursor hacia la izquierda en el modo de entrada de datos.
Enter	<ul style="list-style-type: none"> Permite aceptar y almacenar una entrada. Permite desplazar el cursor hacia la derecha en el modo de entrada de datos.

Precauciones de funcionamiento

- Mantenga el Módulo de alimentación CA/CC conectado al analizador y a la toma de alimentación cuando no lo utilice y mantenga el analizador encendido.
- **No** abra el analizador. No contiene piezas útiles para el usuario. La apertura del analizador infringe el acuerdo de garantía y/o mantenimiento.
- **No** utilice Casetes Coag Dx que no pertenezcan a IDEXX.
- **No** utilice casetes cuya fecha de caducidad haya vencido o que se hayan almacenado de manera inadecuada.
- **No** introduzca por la fuerza un casete en el analizador.
- **No** ejerza una fuerza excesiva al pulsar los botones del analizador.
- **No** exponga el analizador a temperaturas extremas (superiores a 37°C o inferiores a 0°C).
- **No** deje caer el analizador. **No** utilice los resultados del analizador si éste ha caído durante la realización de una prueba.

Conexión del Analizador Coag Dx™ a la IDEXX VetLab® Station (versión 2.30 o posterior)

La conexión del Analizador Coag Dx de IDEXX a la IDEXX VetLab Station (Figura 1) le permite identificar a su cliente y paciente y transferir automáticamente los resultados de la prueba de coagulación a la historia clínica del mismo.

Importante: Cuando el Analizador Coag Dx está conectado a la IDEXX VetLab Station, no se puede iniciar la ejecución de una prueba desde el Analizador Coag Dx. Todas las pruebas se deben iniciar desde la IDEXX VetLab Station.

Para conectar el Analizador Coag Dx a la IDEXX VetLab Station:

1. Asegúrese de que el Analizador Coag Dx y la IDEXX VetLab Station están encendidos.
2. Enchufe un extremo del cable de ethernet al puerto de ethernet en el otro lado del Analizador Coag Dx.
3. Enchufe el otro extremo del cable de ethernet al router que está conectado a la IDEXX VetLab Station. Utilice el primer puerto LAN disponible (etiquetado con 1, 2, 3, etc.)

Importante: No utilice el puerto WAN de conexión a Internet.

4. Cuando aparezca el icono Coag Dx en la pantalla de Inicio de la IDEXX VetLab Station, habrá finalizado con las conexiones.



Figura 1

Servicio técnico de IDEXX:

EE. UU./Canadá/Latinoamérica 1-800-248-2483 • Europa 00800 1234 3399

Australia 1800 655 978 • Nueva Zelanda 0800-102-084

Asia 886-2-28883336,230

IDEXX
LABORATORIES